

ECA100 ソフトウェアインストール クイックガイド

ソフトウェアは ECA100 製品と共に USB で提供されていますが、メガケム社又は TecQuipment 社の Web サイトより、最新の ECA100 ソフトウェアをダウンロードすることができます。

メガケム ダウンロードサイト

https://megachem.co.jp/18_download.htm


TecQuipment 社 ソフトダウンロードサイト


<https://www.tecquipment.com/downloads>

1. ソフトウェアは **Windows 8 又は 10、11 用**です。

ECA100 インストーラーには Microsoft .NET Framework 4.6 が含まれていることに注意してください。これは必要に応じてインストールされます。

ECA100 エンジンサイクル計測システムソフトウェア ダウンロード




 **ECA100ソフトウェア インストールクイックガイドダウンロード**

ソフトウェアはECA100製品と共にUSBで提供されていますが、こちらから最新のECA100ソフトウェア（英語版）をダウンロードすることができます。又は、TecQuipment社サイト（英語）よりダウンロードすることも可能です。
<https://www.tecquipment.com/downloads>

ソフトウェアは**Windows 8又は10、11用**です。
ECA100 インストーラーには Microsoft .NET Framework 4.6 が含まれていることに注意してください。これは必要に応じてインストールされます。

Windows サポートに関する注意事項
Microsoft は Windows 7 のサポートを終了し、それ以降にリリースされたソフトウェアは、Windows 7 にインストールできない可能性があります。Windows 7 を使い続けることは、セキュリティ上問題があり Windows 10 へのアップグレードを強くお勧めします。

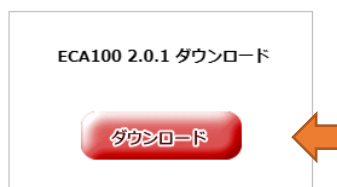

1. DOWNLOAD をクリックすると、ダウンロードを開始します。

あなたの PC へ ZIP ファイル「**ECASetup_***.zip**」が自動的にダウンロードされます。

2. ダウンロードした zip フォルダを展開し、ECASetup_***.exe でインストールを開始してください。

管理上のアクセス権があれば、ソフトウェアはインストールされますが、アクセス権が無い場合はエラーが発生するのでソフトウェアをインストールする前にコンピュータシステム管理者に相談してください。

インストールが出来ない場合は、インストールする前にウイルス検知ソフトウェアを止めてインストールしてみてください。その場合、インストールが終了した時にもとに戻してください。

* TecQuipment 社サイトでは、常に最新版ソフトをダウンロードできます。

株式会社メガケム 教育機器の設計・制作・輸入販売

MEGACHEM
Educational equipment for engineering

〒226-0024 神奈川県横浜市緑区西八朔町 149-8


Tel. 045-937-5188 Fax. 045-937-5199

E-mail; office@megachem.co.jp Web サイト; <http://www.megachem.co.jp>

インストールの開始

“Install”をクリックしてインストール開始



“I accept the agreement”を選択し、“Next”をクリックしてください。

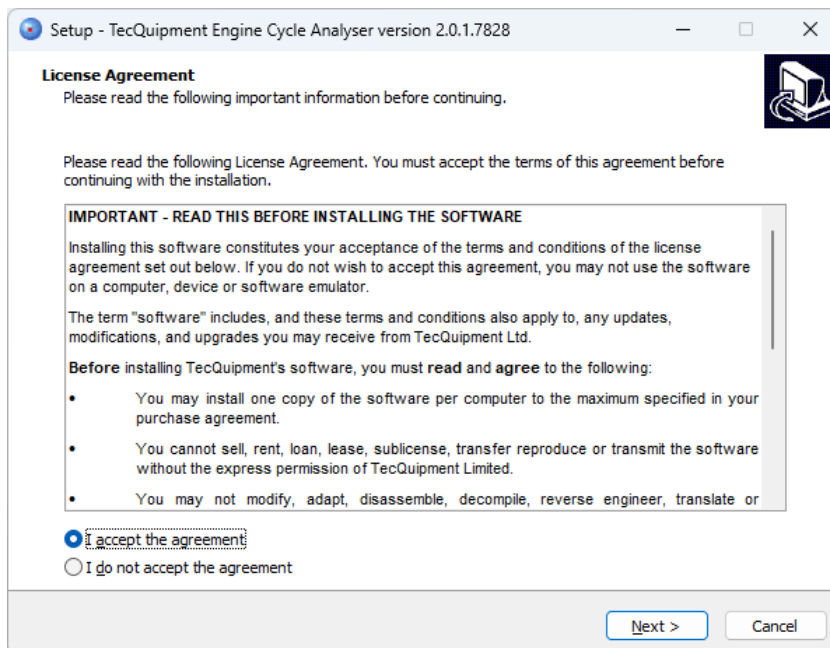

保存先を指定して、“Next”をクリック



デスクトップ上にショートカット作成を選択し、“Next”をクリック

インストール中の表示が現れ、インストールが完了します。Launch（ソフトウェア開く）をクリックしてソフトを立上げてください。

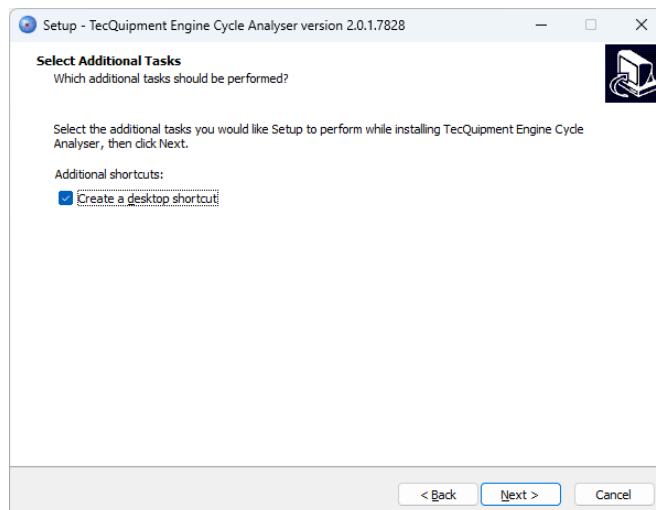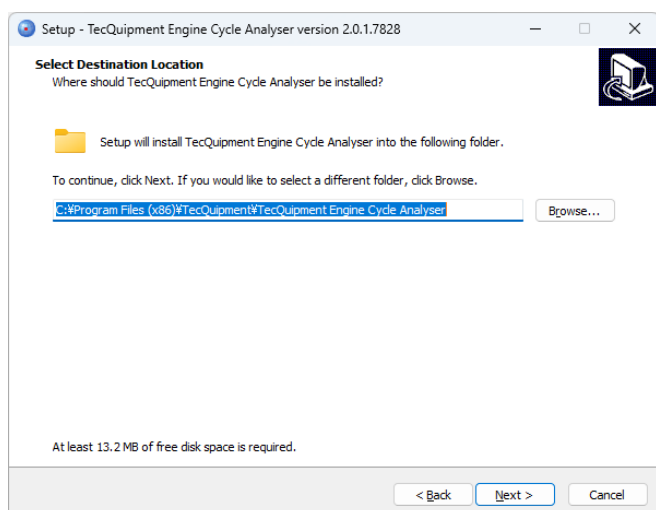

“Install”をクリックして、インストール開始

“Finish”をクリックして、インストールは完了です。

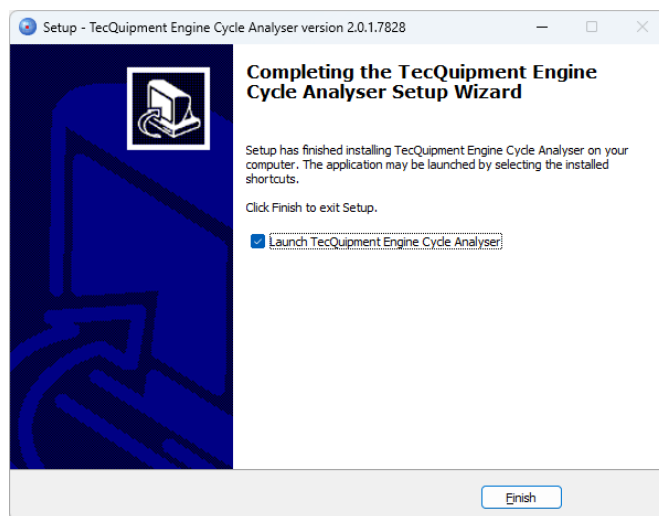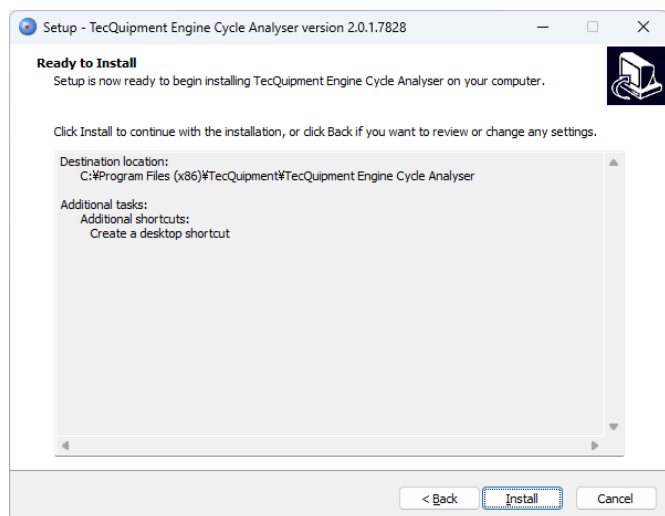

エンジンサイクル計測システム画面が開きます。

ECA100 取扱説明書に沿って実験を行ってください。

